

LABORATORY DIVISION  
DIVISIÓ LABORATORIO

**C I S a**   
CEDACERIA INDUSTRIAL

**CISA CEDACERIA INDUSTRIAL S.L.**

LABORATORY DIVISION / DIVISIÓ LABORATORIO  
c/ ÀLABA, 56 BIS  
08005 BARCELONA (SPAIN)  
TEL. (00) (34) 934 863 115  
FAX (00) (34) 934 863 116

INDUSTRIAL DIVISION / DIVISIÓ INDUSTRIAL  
c/ BATZACS, S/N . POL. IND. ELS BATZACS  
08185 LLIÇA DE VALL, BARCELONA (SPAIN)

cisa@cisa.net  
[www.cisa.net](http://www.cisa.net)

**WE CREATE**  
SIEVING SOLUTIONS TOGETHER

**C I S a**   
CEDACERIA INDUSTRIAL

## DEVELOPMENT

CISA is a company of more than 100 years standing, with an associated depth of experience. As a company we have long been committed to technology Centres, Universities and Research Centres. This close co-operation with the mentioned Institutions has enabled CISA to become a high quality, global manufacturer in the field of test sieves, sieve shakers, sieve calibrations, wire cloth and filters. At present our priorities are to continue in the line of technological innovation, development investment, quality assurance, and international presence of the company to stay in the frontline of laboratory sieving equipment.



## QUALITY

We are aware of the constant headed to improve, that is the reason and the basis of the innovations of our products. The premise is also applied in our organization. To assure it, we undertook the project to attain the ISO 9000 accreditation that we obtained in 1999. Currently we have update it to the new ISO 9001:2000. The ISO certificate proves that our policy of assurances and management of the quality is committed to satisfy the needs of our costumers. We develop this task on a strict legal and technical framework.

## DIVISIONS

### LABORATORY DIVISION

\_TEST SIEVES \_SIEVE SHAKERS \_CALIBRATIONS

### INDUSTRIAL DIVISION

\_WIRE \_MESHES \_PERFORATED PLATES \_INDUSTRIAL SIEVES

### FILTRATION AND MANUFACTURED GOODS DIVISION

\_FILTERS \_MANUFACTURED GOODS IN WIRE MESH

## LA EMPRESA

CISA posee más de 100 años de experiencia en el campo de la granulometría. Hemos estado siempre comprometidos con el desarrollo tecnológico y mantenemos una amplia colaboración con varios Centros tecnológicos, Universidades y Centros de I+D. Esta estrecha cooperación ha capacitado a CISA para ser un fabricante global de alta calidad en el campo de los tamices, las tamizadoras, las calibraciones y las telas metálicas y filtros. Actualmente, nuestras prioridades son continuar en la línea de la innovación tecnológica, la inversión en desarrollo, la calidad y la presencia en los mercados internacionales de la compañía, para continuar en primera línea en el campo del tamizado de laboratorio.

## CALIDAD

Somos conscientes de la continua necesidad de mejorar, esa es la razón y la base para la innovación en nuestros productos. Esta premisa también se aplica a nuestra organización. Para asegurarlo, asumimos y llevamos a cabo el proyecto de obtener la acreditación ISO 9000 en 1998. Hemos obtenido la nueva ISO 9001:2000. Los certificados ISO demuestran que nuestra política de calidad y dirección de la Calidad está comprometida a satisfacer la necesidad de los clientes. Esta tarea se ha desarrollado en un estricto entorno técnico y legal.

## DIVISIONES

### DIVISIÓN LABORATORIO

\_TAMICES \_TAMIZADORAS \_CALIBRACIONES

### DIVISIÓN INDUSTRIAL

\_TELAS METÁLICAS \_TELAS SINTÉTICAS \_CHAPAS PERFORADAS

\_TAMICES INDUSTRIALES

### FILTRACIÓN Y PRODUCTOS A MEDIDA

\_FILTROS \_PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y A MEDIDA CON TELA METÁLICA

### CERTIFIED TEST SIEVES TAMICES CERTIFICADOS

DIAMETER DIÁMETRO	HEIGHT ALTURA
60 mm	23 mm H
75 mm	30 mm H
75 mm	60 mm H
99 mm	23 mm H
100 mm	40 mm H
150 mm	30 mm H
150 mm	50 mm H
200 mm	25 mm H
200 mm	50 mm H
203 mm	25 mm H
203 mm	50 mm H
250 mm	70 mm H
300 mm	70 mm H
350 mm	70 mm H
400 mm	70 mm H
400 mm	100 mm H
450 mm	100 mm H
500 mm	100 mm H
560 mm	100 mm H
600 mm	100 mm H

### CERTIFIED TEST SIEVES TAMIZ CERTIFICADO

#### ACCORDING / TIPOS DE NORMAS

ISO 3310.1:2000 (wire cloth / tela)

ISO 3310.2:1999

(perforated plate / chapa perforada)

ISO 3310.3:2000



(electroformed plate / chapa electroformada)

BS-410-2001

ASTM E-11-2001

ASTM E-161-2000

AFNOR NF X-11-504

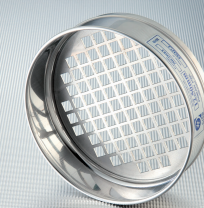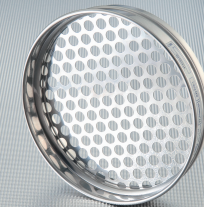

OPENINGS OBERTURAS	HOLES PROFILE PERFIL OBERTURA	OPENINGS OBERTURAS	HOLES PROFILE PERFIL OBERTURA
20 μ	■	1,80 mm	■
25 μ	■	2,00 mm	■
32 μ	■	2,24 mm	■
36 μ	■	2,36 mm	■
38 μ	■	2,50 mm	■
40 μ	■	2,80 mm	■
45 μ	■	3,15 mm	■
50 μ	■	3,35 mm	■
53 μ	■	3,55 mm	■
56 μ	■	4,00 mm	■
63 μ	■	4,50 mm	■
71 μ	■	4,75 mm	■
75 μ	■	5,00 mm	■
80 μ	■	5,60 mm	■
90 μ	■	6,30 mm	■
100 μ	■	7,10 mm	■
106 μ	■	8,00 mm	■
112 μ	■	9,00 mm	■
125 μ	■	9,50 mm	■
140 μ	■	10,00 mm	■
150 μ	■	11,20 mm	■
160 μ	■	12,50 mm	■
180 μ	■	13,20 mm	■
200 μ	■	14,00 mm	■
212 μ	■	16,00 mm	■
224 μ	■	18,00 mm	■
250 μ	■	19,00 mm	■
280 μ	■	20,00 mm	■
300 μ	■	22,40 mm	■
315 μ	■	25,00 mm	■
355 μ	■	26,50 mm	■
400 μ	■	28,00 mm	■
425 μ	■	31,50 mm	■
450 μ	■	35,50 mm	■
500 μ	■	37,50 mm	■
560 μ	■	40,00 mm	■
600 μ	■	45,00 mm	■
630 μ	■	50,00 mm	■
710 μ	■	53,00 mm	■
800 μ	■	56,00 mm	■
850 μ	■	63,00 mm	■
900 μ	■	71,00 mm	■
1,00 mm	■	75,00 mm	■
1,12 mm	■	80,00 mm	■
1,18 mm	■	90,00 mm	■
1,25 mm	■	100,00 mm	■
1,40 mm	■	106,00 mm	■
1,60 mm	■	112,00 mm	■
1,70 mm	■	125,00 mm	■



## BA 200N

**ELECTROMAGNETIC AND DIGITAL SIEVE SHAKER FOR TEST SIEVES 200 / 203 mm Ø**  
**PRECISION AND RELIABILITY**  
**THE LATEST TECHNOLOGY WITH INTERMITTENT SIEVING INCLUDES CLOSING, QUICK AND SAFE SYSTEM "CISA PRESS"**  
**RECOMMENDED FOR MATERIALS WITH DENSITY  $>0,8 \text{ gr} / \text{cm}^3$**   
**SUITABLE FOR BOTH DRY AND WET SIEVING (with the wet sieving kit)**  
**MOVEMENT INDUCED ELECTROMAGNETICALLY, COMBINING A ROTATORY DISPLACEMENT WITH A VERTICAL ONE OF THE SAMPLE**  
**MAXIMUM AMPLITUDE OF VIBRATION 2,00 mm**  
**DIMENSIONS: 400x310x95 mm (without sieves)**  
**NET WEIGHT: 27 Kg**

**TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA Y DIGITAL PARA TAMICES DE ENSAYO DE 200 mm Ø / 203 mm Ø**  
**PRECISIÓN Y FIABILIDAD**  
**TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON TAMIZADO INTERMITENTE**  
**FACILIDAD DE USO: SISTEMA DE CIRRE "CISA-PRESS"**  
**RECOMENDADA PARA MATERIALES DE DENSIDAD  $>0,8 \text{ gr} / \text{cm}^3$**   
**APTA PARA TAMIZAR POR VIA HÚMEDA**  
**MOVIMIENTO INDUCIDO ELECTROMAGNÉTICAMENTE, COMBINANDO UN DESPLAZAMIENTO ROTATIVO CON OTRO VERTICAL DE LA MUESTRA**  
**AMPLITUD DE VIBRACIÓN REGULABLE HASTA 2 mm**  
**DIMENSIONES: 400x310x95 mm (sin tamices)**  
**PESO NETO: 27 Kg**



# BA 200N

# RP 200N



- \_ ELECTROMAGNETIC SIEVE SHAKER FOR TEST SIEVES 200 mm Ø / 203 mm Ø. OPTIONALLY: 100 mm Ø / 150 mm Ø
- \_ SPECIALLY RECOMMENDED FOR CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL LABORATORIES AND ALL THE FIELDS THAT REQUIRE THE GRANULOMETRIC TEST OF PRECISION
- \_ THE LATEST TECHNOLOGY WITH INTERMITTENT SIEVING INCLUDES THE CLOSING SYSTEM QUICK AND SAFE "CISA-PRESS"
- \_ NOISELESS, IT DOESN'T TRANSMIT VIBRATIONS TO THE ENVIRONMENT
- \_ FROM 50 TO 250 gr OF SAMPLE
- \_ MAXIMUM AMPLITUDE OF VIBRATION 2,5 mm
- \_ CAPACITY: UP TO 8 SIEVES OF 50 mm HEIGHT PLUS PAN AND COVER UP TO 15 SIEVES OF 50 mm HEIGHT PLUS PAN AND COVER
- \_ DIMENSIONS: 445x335x200 mm
- \_ VOLTAGE: 230v-50 Hz / 110v-60 Hz
- \_ NET WEIGHT: 35 Kg

- \_ TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA Y DIGITAL PARA TAMICES 200mm Ø / 203 mm Ø. OPCIONAL: 100 mm Ø / 150 mm Ø
- \_ RECOMENDADA ESPECIALMENTE PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACEUTICA, PARA OBTENER ENSAYOS PRECISOS Y FIABLES
- \_ LA ÚLTIMA TECNOLOGIA EN TAMIZADO INTERMITENTE INCLUYE SISTEMA DE CIERRE RAPIDO "CISA-PRESS"
- \_ MUY SILENCIOSA, FIABLE Y ROBUSTA
- \_ DESDE 50 HASTA 250 gr DE MUESTRA
- \_ AMPLITUD DE VIBRACIÓN MÁXIMA 2,5 mm
- \_ CAPACIDAD: HASTA 8 TAMICES DE 50 mmH MÁS TAPA Y FONDO HASTA 15 TAMICES DE 25 mmH MÁS TAPA Y FONDO
- \_ DIMENSIONES: 445x335x200 mm
- \_ VOLTAJE: 230v-50 Hz / 110v-60 Hz
- \_ PESO NETO: 35 Kg



# BA 300N

- \_ ELECTROMAGNETIC SIEVE SHAKER FOR TEST SIEVES 300 mm Ø / 200 mm Ø
- \_ DESIGNED TO SEPARATE SOLID AND THICK MATERIALS
- \_ INCLUDES THE CLOSING, SAFE AND QUICK SYSTEM "CISA PRESS"
- \_ SIEVE SHAKER WITH 3D MOVEMENT
- \_ THE LATEST TECHNOLOGY WITH INTERMITENT SIEVING
- \_ PRECISE AND RELIABLE
- \_ NO MAINTENANCE
- \_ STRONG, RELIABLE AND POLYVALENT
- \_ MAXIMUM AMPLITUDE OF VIBRATION 2,00 mm
- \_ FOUR PROGRAMS, FOR DIFFERENT KINDS OF SIEVING
- \_ NOISE LEVEL (with 4 sieves of 300 mm Ø and 500 gr of sample)
- \_ DIMENSIONS: 485x408x235 mm
- \_ NET WEIGHT: 95 Kg
- \_ VOLTAGE 230V-50 Hz / 110V-60 Hz

- \_ TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA DIGITAL PARA TAMICES DE 300 mm Ø / 200 mm Ø
- \_ DISEÑADA PARA LA SEPARACIÓN DE MATERIALES SÓLIDOS GRUESOS
- \_ INCLUYE SISTEMA DE CIERRE RÁPIDO "CISA PRESS"
- \_ TAMIZADORA DE MOVIMIENTO 3-D
- \_ LA ÚLTIMA TECNOLOGIA EN TAMIZADO INTERMITENTE
- \_ PRECISA Y FIABLE
- \_ NO NECESITA MANTENIMIENTO
- \_ ROBUSTA, FIABLE Y POLIVALENTE
- \_ INCLUYE 4 PROGRAMAS PARA DIFERENTES TIPOS DE TAMIZADO
- \_ NIVEL DE RUIDO (CON 4 TAMICES DE 300 mm Ø Y 500 gr DE MUESTRA) <75 dBA
- \_ DIMENSIONES: 445x335x150 mm
- \_ PESO NETO: 95 Kg
- \_ VOLTAJE: 230V-50 Hz / 110V-60 Hz



## BA 400N

### ELECTROMAGNETIC SIEVE SHAKER FOR TEST SIEVES

350 mm Ø / 400 mm Ø / 450 mm Ø

MOVEMENT INDUCED ELECTROMAGNETICALLY, COMBINING A ROTARY DISPLACEMENT WITH A VERTICAL ONE OF THE SAMPLE

INCLUDES CLOSING SYSTEM OF THE COLUMN OF SIEVES WITH FIXTURES BARS, TOP CLAMP AND RELEASE FIXTURES

UP TO 8 SIEVES 400 mm Ø

MAXIMUM LOAD 50 Kg

DIFFERENT PARAMETERS TO PROGRAM

DIMENSIONS: 540 mm Ø x 1200 mm H (with sieves)

NET WEIGHT: 50 kg

VOLTAGE: 230-50 Hz / 110V-60 Hz

POWER: 1400 W MAX

TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA Y DIGITAL PARA TAMICES DE 350 mm Ø / 400 mm Ø / 450 mm Ø  
MOVIMIENTO INDUCIDO ELECTROMAGNÉTICAMENTE, COMBINANDO UN DESPLAZAMIENTO ROTATIVO CON OTRO VERTICAL DE LA MUESTRA

INCLUYE SISTEMA DE CIERRE CON BARRAS ROSCADAS PARA TAMIZAR CON PRECISIÓN GRANDES CANTIDADES O VOLUMENES

ADMITE HASTA 8 TAMICES DE 400 mm Ø

CAPACIDAD DE CARGA HASTA 50 Kg

DIMENSIONES: 540 mm Ø x 1200 mm H (con tamices)

PESO NETO: 50 kg

VOLTAJE: 230-50 Hz / 110V-60 Hz

POWER: 1400 W MAX



# BA 400N



THE AIR JET SIEVE SIFTER AJ 200 N IS USED FOR PARTICLE SEPARATION ON DRY PRODUCTS

LA TAMIZADORA DE BARRIDO DE AIRE AJ 200 N SE UTILIZA PARA LA SEPARACIÓN DE PARTÍCULAS EN PRODUCTOS SECOS

# AIR JET **AJ 200N** <sup>NEW</sup>

## APPLICATIONS

FOR ALL KIND OF DRY MATERIALS, FROM 10  $\mu\text{m}$  TO 4 mm  
RECOMMENDED FOR ELECTROSTATIC MATERIALS

## ADVANTAGES

- \_ SUPPLY 85 TO 264 VAC / 47 TO 63 Hz
- \_ SPEED OF ROTATION OF THE SLOTTED AND ADJUSTABLE NOZZLE, FROM 1 TO 100 rpm
- \_ DESIGNED FOLLOWING THE STANDARDS OF THE UNE-EN933-10 (ARIDS)
- \_ CONSUMPTION 20 W
- \_ RANGE OF SIEVING 10  $\mu\text{m}$  TO 4 mm
- \_ SIEVING PARAMETERS ADJUSTABLE DIGITALLY
- \_ 200 mm DIAMETER SIEVES
- \_ DIGITAL REGULATION
- \_ ERGONOMIC DESIGN
- \_ 2 YEARS WARRANTY
- \_ CE MARKED

## PRINCIPLE OF OPERATION

THIS DIGITAL SIFTER MOVES THE MATERIAL BEING ANALYSED WITH THE AIR FLOW. THE PARTICLES ARE SWEEP AWAY BY THE AIR FLOW AND THEY WILL PASS THROUGH THE SIEVE. IN ORDER TO MAKE THEM GO THROUGH IT, THIS EFFECT IS REACHED BY USING AN AIR FLOW (VACUUM) WHICH PROVOKES A CONTROLLED DEPRESSION. THE EQUIPMENT COUNTS WITH A SYSTEM OF 10 MENUS WITH 10 DIFFERENT USER PROGRAMS THAT CAN BE SET DEPENDING ON THE NEEDS OF THE CUSTOMER. THEY ALSO KEPT STORED IN THE FLASH MEMORY. THE PARAMETERS TO BE SET ARE THE TIME, THE NAME OF THE PROGRAM, THE VISUALISATION UNITS OF PRESSURE AND THE SPEED OF DIFFUSION.

## ACCESSORIES

- AIR JET SYSTEM SIEVES, SPECIFICALLY DESIGNED FOR THE SIEVING WITH AIR FLOW
- COMPATIBLE WITH STANDARD CISA SIEVES
- DOMESTIC VACUUM EQUIPMENT. RECOMMENDED POWER 1500 TO 2000 W
- O-RINGS FOR WET SIEVING (200 mm  $\phi$ )

## APLICACIONES

\_ PARA TODO TIPO DE MATERIALES SECOS, DESDE 10  $\mu\text{m}$  A 4 mm  
\_ RECOMENDADO PARA MATERIALES ELECTROESTÁTICOS

## VENTAJAS

- \_ ALIMENTACIÓN 85 A 264VAC / 47 A 63 Hz
- \_ VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL DIFUSOR AJUSTABLE DESDE 1 A 100 rpm
- \_ DISEÑADA PARA NORMA UNE-EN933-10 (ÁRIDOS)
- \_ CONSUMO 20 W
- \_ RANGO DE MEDIDA DESDE 10  $\mu\text{m}$  A 4 mm
- \_ TODOS LOS PARÁMETROS DEL TAMIZADO SE AJUSTAN DIGITAL Y VISUALMENTE
- \_ TAMICES DE 200 mm DE DIÁMETRO
- \_ REGULACIÓN DIGITAL CON MONOMANDO
- \_ DISEÑO ERGONÓMICO
- \_ 2 AÑOS DE GARANTÍA
- \_ MARCADO CE

## FUNCIONAMIENTO

TAMIZADORA POR BARRIDO DE AIRE DIGITAL QUE SU FUNCIONAMIENTO ES LA UTILIZACIÓN DE UN BARRIDO POR AIRE QUE ARRASTRA LAS PARTÍCULAS PARA HACERLAS PASAR A TRAVÉS DEL MEDIO TAMIZANTE, ESTE EFECTO SE CONSIGUE MEDIANTE UNA CORRIENTE DE AIRE (ASPIRADOR) QUE PROVOCA UNA DEPRESIÓN CONTROLADA. SISTEMA DE MENÚS CON 10 PROGRAMAS DE USUARIO CONFIGURABLES POR EL MISMO Y QUE SE ALMACENAN EN MEMORIA FLASH. EL USUARIO PUEDE CONFIGURAR EL NOMBRE DEL PROGRAMA, EL TIEMPO, LAS UNIDADES DE VISUALIZACIÓN DE LA PRESIÓN Y LA VELOCIDAD DE DIFUSIÓN.

## ACCESORIOS

- TAMICES AIR JET SYSTEM, ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA EL TAMIZADO POR BARRIDO DE AIRE
- COMPATIBLE CON LOS TAMICES ESTÁNDAR CISA
- EQUIPO DE ASPIRACIÓN DOMESTICO. POTENCIA RECOMENDADA 1500 A 2000 W
- JUNTAS DE GOMA PARA TAMIZADO VÍA HÚMEDA (200 mm  $\phi$ )



**CONTROL SCREEN, SECURITY AND FILTRATION, SEPARATION OF AGGREGATES AND STRANGE PARTICLES**

**CRIBADO DE CONTROL, SEGURIDAD Y FILTRACIÓN, SEPARACIÓN DE AGLOMERADOS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS**

# MOBILE VIBROSEPARATOR **VIB 450** NEW

- \_ BINS AND SACKS RECEPTION
- \_ DISCONTINUOUS WORKS
- \_ CAPACITY HIGHER THAN 30 Kg
- \_ CHANGE OF SIEVES IN SECONDS
- \_ STAINLESS STEEL 304 & 316
- \_ LOW MAINTENANCE
- \_ NOISELESS AND STATIC
- \_ STANDARD SIEVES CISA 450 mm

\_ THE CLEANLINESS OF A PRODUCT IS ONE THE MOST IMPORTANT PARAMETER IN ORDER TO MEASURE THE QUALITY OF THE FINISHED PRODUCT. PRODUCTION AND CUSTOMER REQUIREMENTS IN INTERMEDIATE PRODUCTS FORCE TO EFFECT A SECURITY SCREENING AND CLEANING, AND SEPARATE AGGREGATES, LUMPS, BINDS AND STRANGE PARTICLES.

THE MOBILE VIBRO SEPARATOR **VIB 450** ALLOWS THE SCREENING OF SMALL QUANTITIES (PRODUCTS STORED IN SACKS OR BINS) FASTER AND EASIER THAN OTHER METHODS.

#### INDUSTRIES

FOOD  
PHARMACY  
CHEMICAL  
COSMETICS  
HERBALIST  
WOOD  
METALLURGY

#### ACCESSORIES

ANALYTICAL SIEVES IN STAINLESS STEEL FRAME 450 mm Ø  
BRUSHES FOR CLEANING THE SIEVES  
SIEVES CALIBRATION

#### USE

ADDITIVES  
MINORITIES  
MICRO INGREDIENTS  
CONTROL BEFORE BINNING  
PRODUCT RECYCLING  
FILTRATION

- \_ RECEPCIÓN DE SACOS Y BIDONES
- \_ TRABAJOS DISCONTINUOS
- \_ CANTIDADES SUPERIORES A 30 Kg
- \_ CAMBIO DE TAMIZ EN SEGUNDOS
- \_ INOX 304 Y 316
- \_ BAJO NIVEL DE MANTENIMIENTO
- \_ ESTÁTICO Y SILENCIOSO
- \_ TAMICES ESTÁNDAR CISA 450 mm

\_ LA LIMPIEZA DEL PRODUCTO ES UN DE LOS PARÁMETROS MÁS IMPORTANTES PARA MEDIR LA CALIDAD DEL PRODUCTO ACABADO. LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN, EN CASO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, O LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE, OBLIGAN A EFECTUAR UN CRIBADO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, AL OBJETO DE SEPARAR AGLOMERADOS, GRUMOS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS.  
\_ EL SEPARADOR VIBRANTE MÓVIL **VIB 450** PERMITE EL CRIBADO DE

PEQUEÑAS CANTIDADES (PRODUCTOS RECEPCIONADOS EN SACOS O BIDONES) DE UNA MANERA SENCILLA Y RÁPIDA.

#### INDUSTRIAS

ALIMENTACIÓN  
FARMACIA  
QUÍMICA  
COSMÉTICA  
HERBORISTERÍA  
MADERA  
METALURGIA

#### ACCESORIOS

TAMICES ANALÍTICOS BASTIDOR INOXIDABLE 450 mm Ø  
TELA METÁLICA INOX  
CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE TAMICES  
CALIBRACIÓN DE TAMICES

#### APLICACIONES

ADITIVOS  
MINORITARIOS  
MICRO INGREDIENTES  
CONTROL ANTES DE ENSACADO  
RECICLAJE DE PRODUCTOS  
FILTRACIÓN

## BRUSHES FOR THE SIEVING CLEANERS

Wide range of brushes especially designed for the cleaning of the sieves. As the sieves are an important tool essential for various industries, it is very important to take care of them, cleaning the brushes specially designed for this task.



### FUNCTIONS

**ROUND BRUSHES:** used to clean sieves with very small apertures and sieves with big apertures. Especially suitable for apertures of less than 100 mesh, use them with special care.

**TRIANGULAR BRUSHES:** used to put them between sieves, during the sieve process.

### TYPOLOGIES / TIPOLOGÍAS

**ROUND** in 2 sizes / **REDONDO** en 2 medidas

#### BIG / GRANDE

**Paintbrush type** / Tipo brocha

**65 mm Ø** / 65 mm Ø

**175 mm of length** / 175 mm de largo

**Wood handle** / Mango de madera

**Horsehair in nylon** / Cerdas en nylon

#### SMALL / PEQUEÑO

**Paintbrush type** / Tipo brocha

**40 mm Ø** / 40 mm Ø

**100 mm of length** / 100 mm de largo

**Plastic handle** / Mango en plástico

**Horsehair in nylon** / Cerdas en nylon

#### TRIANGULAR / TRIANGULAR

**Sizes: 70 mm x 30 mm H** /

**Medidas: 70 mm x 30 mm H**

**Horsehair in nylon** /

**Cerdas en nylon**



**WE MANUFACTURE AND DISTRIBUTE WIRE MESH**

**FABRICAMOS Y DISTRIBUIMOS TELA METÁLICA**

**WE ARE SPECIALIZED IN STAINLESS STEEL AND SPECIAL ALLOYS**

**SOMOS ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE Y ALEACIONES ESPECIALES**



**WE MANUFACTURE TAILORED PRODUCTS WITH WIRE MESH, SUCH AS FILTERS, IMMERSION BASKETS, SUPPORTS, ETC.**

**FABRICAMOS TODO TIPO DE MANIPULADOS CON TELA METÁLICA, FILTROS, CESTAS DE INMERSIÓN, ETC.**

## CEPILLOS PARA LA LIMPIEZA DE TAMICES

Amplia gama de cepillos especialmente diseñados para la limpieza de los tamices. Como los tamices son una herramienta esencial para diversas industrias, es muy importante cuidarlos, limpiándolos con cepillos expresamente diseñados para ello.

### FUNCIONES

**CEPILLOS REDONDOS:** Sirve para limpiar tanto tamices de aberturas muy pequeñas como para tamices de aberturas grandes. Especialmente adecuados para aberturas de menos de 100 mesh, usado con cuidado

**CEPILLOS TRIANGULARES:** sirve para poner entre tamiz y tamiz, durante el tamizado.

#### TRIANGULAR / TRIANGULAR

**Sizes: 70 mm x 30 mm H** /

**Medidas: 70 mm x 30 mm H**

**Horsehair in nylon** /

**Cerdas en nylon**

## GLASS SPHERES FOR SIEVING CALIBRATION

**Glass sphere for calibrating sieves**

**Range of calibration available from 325 Mesh until 10 Mesh**

**Distribution of the available diameters from 40µm Ø until 2450 µm Ø**

**Delivered in flasks**



## ESFERAS DE CALIBRACIÓN DE TAMICES

**Esferas de vidrio para calibración de tamices**

**Rango de calibración desde 325 Mesh hasta 10 Mesh**

**Distribución de diámetros desde 40 µm Ø hasta 2450 µm Ø**

**Servidas en un frasco**

## CALIBRATION SANDS

**Sands for calibrating sieves**

**Delivered in 3 bottles of 150 gr**

**Ranges of calibration**

**Flask a) 600 µm - 150 µm**

**Flask b) 212 µm - 75 µm**

**Flask c) 150 µm - 45 µm**

## ARENAS PARA CALIBRACIONES

**Arenas para calibración de tamices**

**Servidas en 3 frascos de 150 gramos**

**Rangos de calibración**

**Frasco a) 600 µm - 150 µm**

**Frasco b) 212 µm - 75 µm**

**Frasco c) 150 µm - 45 µm**